

UrgoTul geïmpregneerde wondcontactlaag zelf hydrocolloïd

Productinformatie

UrgoTul, plooibaar, niet-occlusief wondcontactlaag, polyester net geïmpregneerd met hydrocolloïddeeltjes en vaseline; voor acute wonden en chronische rode en gele wonden in de granulatie- en epithelisatiefase. 

De steriele wondcontactlaag bestaat uit een polyester net dat geïmpregneerd is met hydrocolloïddeeltjes en vaseline. De wondcontactlaag vormt bij contact met wondexsudaat een lipido-colloïdlaag. Deze laag voorkomt dat het verband aan de wond plakt en maakt dat het verschonen van het verband pijnloos en niet traumatisch is. De hydrocolloïddeeltjes vormen bij contact met het wondexsudaat een gel die samen met de vaseline voor gunstige genezingsomstandigheden (wondheling in een vochtige omgeving) zorgt. Door de lipido-colloïdlaag is het verband geschikt voor behandeling van acuut of chronisch weefselverlies. Het wondexsudaat wordt door de mazen naar het secundair verband afgevoerd, zodat occlusie en maceratie wordt voorkomen.


Het wondcontactlaag voelt niet vet aan, is dun en plooibaar, daardoor past ze zich aan de contouren van de wond aan.

Specificatie:

- geïmpregneerde wondcontactlaag
- polyester netwerk geïmpregneerd met hydrocolloïddeeltjes en vaseline
- vorming lipido-colloïdlaag
- hydrocolloïddeeltjes vormen gel bij contact met wondexsudaat
- wondexsudaat wordt door mazen afgevoerd naar secundair verband
- voelt niet vet aan
- dun en plooibaar
- steriel

Toepassing:

- voor de plaatselijke behandeling van acute wonden: oppervlakkige brandwonden, schaafwonden en traumatische wonden
- voor de behandeling van chronische wonden in de granulatie- en epithelisatiefase: ulcera en decubitus wonden

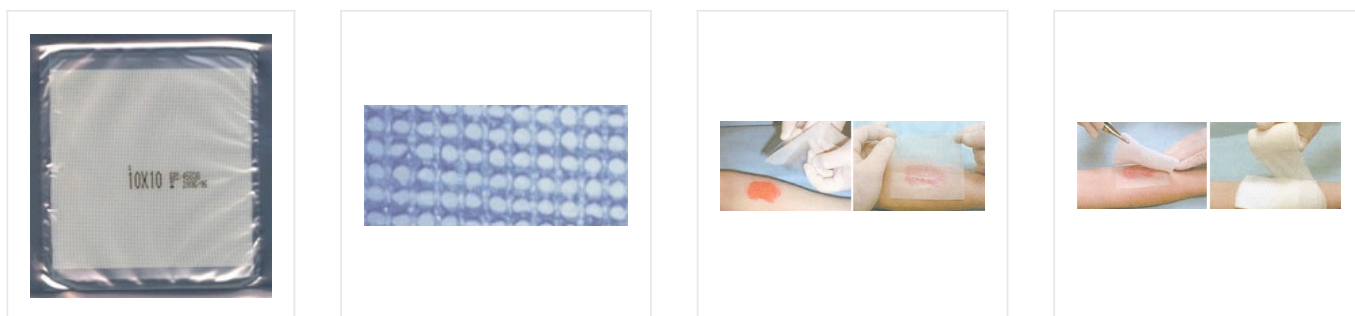

Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3030771	Urgotul Wondverband Polyester Met Cmc En Vaseline 5 X 5 Cm Ref 505008 *S*	10 st.	30 st.	14904535
	3030772	Urgotul Wondcontactlaag 10x10cm 505009 Steriel	10 st.		14904543
	3030773	Urgotul Wondverband Polyester Met Cmc En Vaseline 10 X 40 Cm Ref 505010 *S*	10 st.		14904578
	3030774	Urgotul Wondcontactlaag 15 X 20 Cm Ref 505011 *S*	10 st.		14904551