

UrgoClean Rope vezelverband streng

Productinformatie

UrgoClean, sterk absorberend vezelverband streng; voor chronische en acute exsuderende diepe wonden in de reinigingsfase.

De steriele vezelverband streng is opgebouwd uit sterk absorberende en adhesieve Hydro-Reinigende vezels (polyacrylaat). In contact met exsudaat zwellen de vezels op tot een gel. De gel hecht zich aan het debris dat vervolgens wordt geëlimineerd door middel van absorptie en drainage. De gelvorming zorgt voor het behoud van een vochtig wondmilieu waardoor de genezing wordt bevorderd en het exsudaat wordt ingesloten. Dit zorgt er tevens voor dat het exsudaat en het debris zich niet kan verspreiden door het verband. De streng vormt zicht naar de wond. De streng is door de vormvastheid van de vezels in een geheel en pijnloos te verwijderen.

Specificatie:

- vezelverband
- streng van polyacrylaat vezels
- gelvormend
- verkleeft niet
- sterk absorberend
- verticale absorptie
- creëert vochtig wondmilieu
- in een stuk te verwijderen
- steriele wondmeetsonde bijgevoegd
- steriel


Toepassen bij:

- ulcus cruris
- decubituswonden
- diabetische voet
- traumatische wonden
- postoperatieve wonden
- oncologische wonden

Niet toepassen:

- in fistelwonden met een diameter kleiner dan die van de sonde
- op droge wonden

- als chirurgisch wondverband (niet resorbeerbare tamponstreng)
- voor endonasale applicatie bij operatie aan de neusbijholten

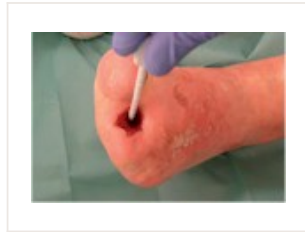

Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3031180	Urgoclean Nonwoven Wondverband Van Polyacrylaat Hydrereinigende Vezels Rope Ref 550111 *s*	5 st.	120 st.	15757943