

BioDerm externe katheter

Productinformatie

BioDerm, externe katheter; voor het opvangen van urine bij incontinenten mannen.



De externe katheter bestaat uit een connector en een kleeftlaag, in de vorm van bloemblaadjes, van hydrocolloïd. Middels de bloemblaadjes wordt de katheter op de eikel bevestigd. De urine kan in een onbelemmerde urinestroom afgevoerd worden middels de knikvrije connector. De externe katheter kan gebruikt worden in combinatie met intermitterende katheters. De ECD katheter is een alternatief voor condoomkatheters, verblijfskatheters en absorberende verbanden. De katheter biedt een oplossing voor diverse indicaties zoals een teruggetrokken penis, neurogene blaas en/of overgevoeligheid voor latex en/of andere kleeftlagen. Deze katheter is tevens geschikt voor mannen met een vergrote urinebuis en (plotselinge) harde urinestroom.

Specificatie:

- externe katheter
- hydrocolloïd
- connector
- hydrocolloïde kleeftlaag

Toepassing:

- ingetrokken en korte penis
- neurogene blaas (niet goed werkende blaas door beschadiging van gedeelte zenuwstelsel)
- overgevoeligheid voor latex en/of andere kleeftlagen
- na een prostatectomie (verwijdering gehele prostaat)
- huidbeschadigingen door veelvuldig wisselen van een condoomkatheter
- urineweginfectie, veroorzaakt door bijvoorbeeld een verblijfskatheter

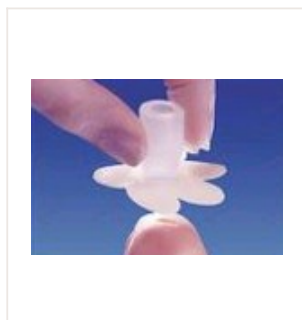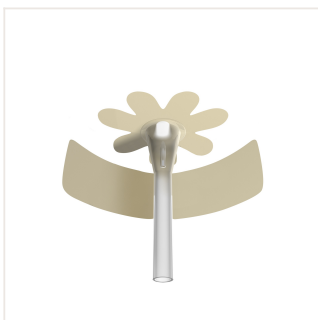

Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3034991	Men Liberty Acute Ex Kath 1d M Hydrocolloid 21026 Steriel	1 st.	30 st.	15285901