

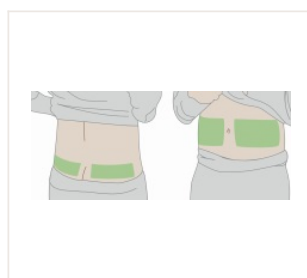
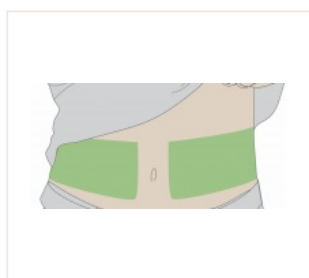
Dexcom G6 CGM sensor steriel

Productinformatie



Dexcom G6 CGM sensor; meet continue de glucosewaarden in het onderhuidse weefsel. De sensor is aan de onderzijde voorzien van een platina draadje, gecoat met glucoseoxidase, die net onder de huid wordt ingebracht. De bovenzijde van de sensor is voorzien van een houder waarin de zender geplaatst moet worden. Verder is de sensor voorzien van een zelfklevend pleister om het geheel op het lichaam te bevestigen. Tussen 2-17 jaar kan de sensor op de buik of bovenbil ingebracht worden. Vanaf 18 jaar kan de sensor alleen op de buik ingebracht worden. De sensor dient ingebracht te worden met behulp van de bijgeleverde sensorapplicator. De sensor is waterbestendig en kan 10 dagen blijven zitten. Steriel verpakt. Onderdeel Dexcom G6 CGM systeem.

Specificatie:

- sensor
- lengte platina draadje: 9mm
- inbrenghoek: 45°
- meetbereik: 2.2-22.2 mmol/L
- kan 10 dagen blijven zitten
- waterbestendig
- bewaartemperatuur tussen 2°C en 30°C



Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3060381	Dexcom G6 Sensoren 3 Stuk Sts-gs-003 Steriel	3 st.	48 st.	16744446
	3060380	Dexcom G6 Sensoren 1 Stuk Sts-gs-002 Steriel	1 st.	40 st.	16980360