

InTube verstevigde endotracheale tube met cuff

Productinformatie

InTube, gecuffde endotracheale tube met Murphy's Eye; voor het behouden van een vrije luchtweg via de neus of mond.

Steriele endotracheale tube voor het behouden van een vrije luchtweg en ervoor te zorgen dat zuurstof de longen kan bereiken. De tube wordt via de neus of mond in de luchtpijp geplaatst door een deskundige. Door de gebogen halfronde vorm wordt de intubatie vergemakkelijkt. Een cuff wordt gebruikt om de luchtweg richting de keelholte volledig af te sluiten. Dit zorgt ervoor dat de ademhaling alleen nog maar richting de longen loopt en voorkomt dat er lucht langs de tube lekt of dat speeksel in de luchtweg loopt.

Het Murphy's Eye, een extra oog aan het uiteinde van de tube, zorgt voor extra veiligheid indien de tube aan de onderkant verstopt raakt. De diepte wordt gemarkeerd per centimeter, gemeten vanaf het distale uiteinde van de tube. Lijnen met een graduatie die op de tube gemarkeerd staan geven aan hoe diep de tube geplaatst is. De afstand van het distale uiteinde tot de eerste lijn is 30mm. De afstand tot de tweede lijn is 40mm en de afstand tot de derde lijn is 50mm.

Een 15mm verbindingstuk verbindt de tube met standaard apparatuur. De tube wordt met name gebruikt bij de anesthesie tijdens operaties, spoedeisende hulp en op de intensive care voor luchtwegmanagement en mechanische ventilatie. De tube is gemaakt van PVC (polyvinylchloride).

Specificatie:


- endotracheale tube
- met cuff
- oraal en nasaal
- magill; halfronde vorm
- Murphy's Eye
- steriel
- transparant
- radiopaak
- latexvrij
- van PVC (polyvinylchloride)
- met 15mm connector

Toepassen bij:

- het vrijhouden van de luchtweg via de neus of mond

Niet toepassen bij:

- obstructie van de luchtwegen van de patiënt wegens vreemde voorwerpen

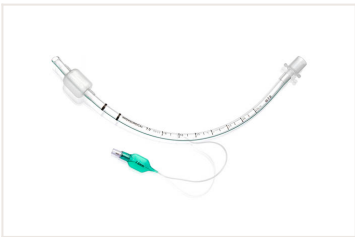

Artikeloverzicht

	Artikelnr.	Omschrijving	binnendoos	buitendoos	ZI-nummer
	3036784	Intersurgical Et Tube Met Cuff Maat 7 8040070	10 st.	10 st.	
	3036787	Intersurgical Et Tube Met Cuff Maat8 8040080	10 st.	10 st.	
	3039200	Intersurgical Et Tube Met Cuff Maat 6 8040060 Steriel	10 st.	10 st.	
	3051181	Intersurgical Et Tube Met Cuff Maat 9 8040090 Steriel	1 st.	10 st.	