

# AllStar PRO insulinepen



## Productinformatie

AllStar PRO, hervulbare insulinepen; voor het toedienen van insuline uit een insulinepatroon. De insulinepen bestaat uit een dop, een patroonhouder met schaal aanduiding en een pengedeelte met zuigerstang, dosisvenster en een doseerknop.



De hervulbare insulinepen moet gebruikt worden met insulinepatronen van 3ml met Lantus, Apidra of Insuman 100E/ml insuline van Sanofi. De insulinepen is met behulp van de doseerknop instelbaar in stappen van hele eenheden. Per keer kunnen er minimaal 1 tot maximaal 80 eenheden insuline geïnjecteerd worden. Bij het instellen van de dosering is er steeds een klik hoorbaar. Door middel van de terugdraai mogelijkheid kan een onjuist ingestelde dosis gecorrigeerd worden. De insulinepen wordt geleverd met een bewaaretui. Specificatie:

- insulinepen
- hervulbaar
- instelbaar per stap: 1 eenheid
- instelbaar per keer: 1-80 eenheden
- gewicht: 28 gram
- lengte x diameter: 159x16mm

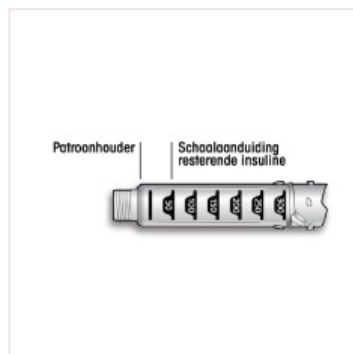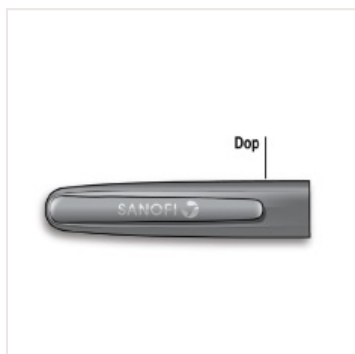

## Artikeloverzicht

|                                                                                   | Artikelnr. | Omschrijving                          | binnendoos | buitendoos | ZI-nummer |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  | 3067973    | Allstar Pro Insulinepen Silver 901455 | 1 st.      | 1 st.      | 16599233  |
|  | 3067972    | Allstar Pro Insulinepen Blue 755181   | 1 st.      | 1 st.      | 16599241  |